

KIT CÂNULA PARA

COMPRESSÃO DO TRIGÊMEO POR BALÃO

KF0001FAA




M I C R O M A R

INSPIRED BY LIFE

Kit Cãnula para compressão do trigêmeo por Balão

Existem várias causas para a neuralgia do trigêmeo tais como: as placas desmielinizantes da esclerose múltipla, aneurismas da artéria basilar, malformação arteriovenosa, tumores, ou por processos inflamatórios e infecciosos.

O tratamento poder ser feito de diferentes formas: através de neurólise química, realizada com agentes químicos, neurólise térmica, realizada com o uso de um gerador de radiofrequência ou por neurólise mecânica, realizada com o uso de um cateter de Forgaty, também conhecido como “balão”.

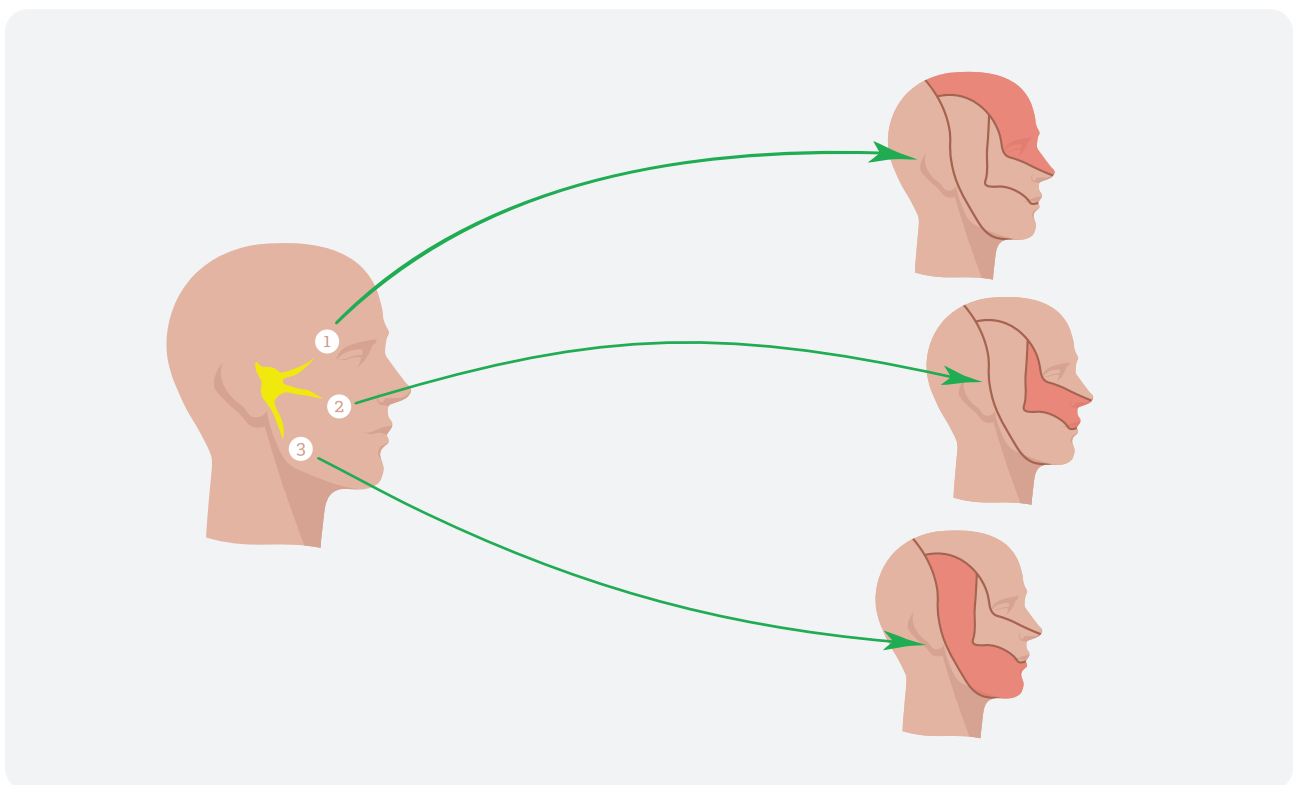

“A TÉCNICA DE COMPRESSÃO DO TRIGÊMEO POR BALÃO É SEGURA E APRESENTA DIVERSAS VANTAGENS COM RELAÇÃO A OUTRAS TÉCNICAS, POR PERMITIR ALÍVIO DA DOR EM QUALQUER DIVISÃO DO NERVO TRIGÊMEO, ALÉM DO BAIXO CUSTO E SIMPLICIDADE DE EXECUÇÃO.”

O Kit Cãnula para compressão do trigêmeo por Balão foi desenvolvido para atender o procedimento cirúrgico para tratamento da neuralgia de trigêmeo. Minimamente invasiva, a técnica percutânea permite que o neurocirurgião chegue até o gânglio do nervo trigêmeo para realizar o procedimento.

A Micromar oferece um kit cãnula para compressão do trigêmeo por balão composto por:

- › 01 Catéter de Fogarty;
- › 01 Punção de Pontas Intercambiáveis;
- › 01 Botão para Punção;
- › 01 Seringa de 1ml;
- › 01 Cãnula;
- › 01 Mandril com Ponta Cônica;
- › 01 Mandril com Ponta Facetada.



DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES

PUNÇÃO DE PONTAS INTERCAMBIÁVEIS:

Material - Aço inox

Comprimento do punção - 220 mm

Diâmetro do Corpo do punção - 1,8 mm

Corte de uma das Pontas - 15°

MANDRIL DE PONTA FACETADA:

Material - Aço inox

Comprimento - 124 mm

Diâmetro do Corpo - 1,8 mm

Corte da Ponta - 15°

MANDRIL DE PONTA CÔNICA:

Material - Aço inox

Comprimento - 124 mm

Diâmetro do Corpo - 1,8 mm

CÂNULA:

Material - Aço inox

Comprimento da Cãnula - 100 mm

Diâmetro da Cãnula - 2,1 mm

CATÉTER DE FOGARTY

Comprimento - 400 mm

Diâmetro - 1,5 mm

Capacidade Máxima de Líquido - 0,75 ml

Força Máxima de Tração (Balão Insuf) - 1,5 lbs

Diâmetro do Balão Insuflado - 9 mm

SERINGA:

Capacidade - 1ml

M I C R O M A R

INSPIRED BY LIFE

Distribuidor Principal:



As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas. Consulte disponibilidade dos produtos Micromar para sua região.

Os produtos deste catálogo estão cobertos pelos seguintes Registros ANVISA: 80051250023 | 80219050028 | 10033439058

POR - VER:02 - 23/01/2020. A última versão deste catálogo pode ser encontrada no site micromar.com

Micromar Ind. Com. Ltda.

Av. Marginal ao Córrego da Serraria, nº 168
CEP 09980-390
Diadema · São Paulo · Brasil
Telefone: +55 11 4057-5722
info@micromar.com

Micromar Europe S.L.

Calle Alemania 1, 1C
CP 45005
Toledo · Spain
Phone: +34 925 718 022
info@micromareurope.com

Social Network

www.micromar.com
facebook.com/micromar
instagram.com/micromarneurosurgery